



ANCRE DE SUTURE TEXTILE

SA | ANCRE SOFT ANCHOR

ARTHRO **VIMS**®

SOFT ANCHOR



V | **SPORT
MEDICINE**
ADVANCED TECHNOLOGY


ANCRES DE SUTURE TEXTILE

Indiquées pour la fixation des tissus mous ou prothétiques à l'os

Les ancres de suture **ARTHROVIMS SOFT ANCHOR** sont des ancres impactées de petits diamètres composées uniquement de fibres de textile.

Le corps de l'ancre en Polyester est associé à un ou deux fils de suture UHMWPE qui sont montés sur un tournevis à usage unique permettant l'insertion dans l'os.

La traction sur les fils de suture permet de modifier la forme du corps de l'ancre qui se bloque ainsi en arrière de la corticale et assure un ancrage efficace.

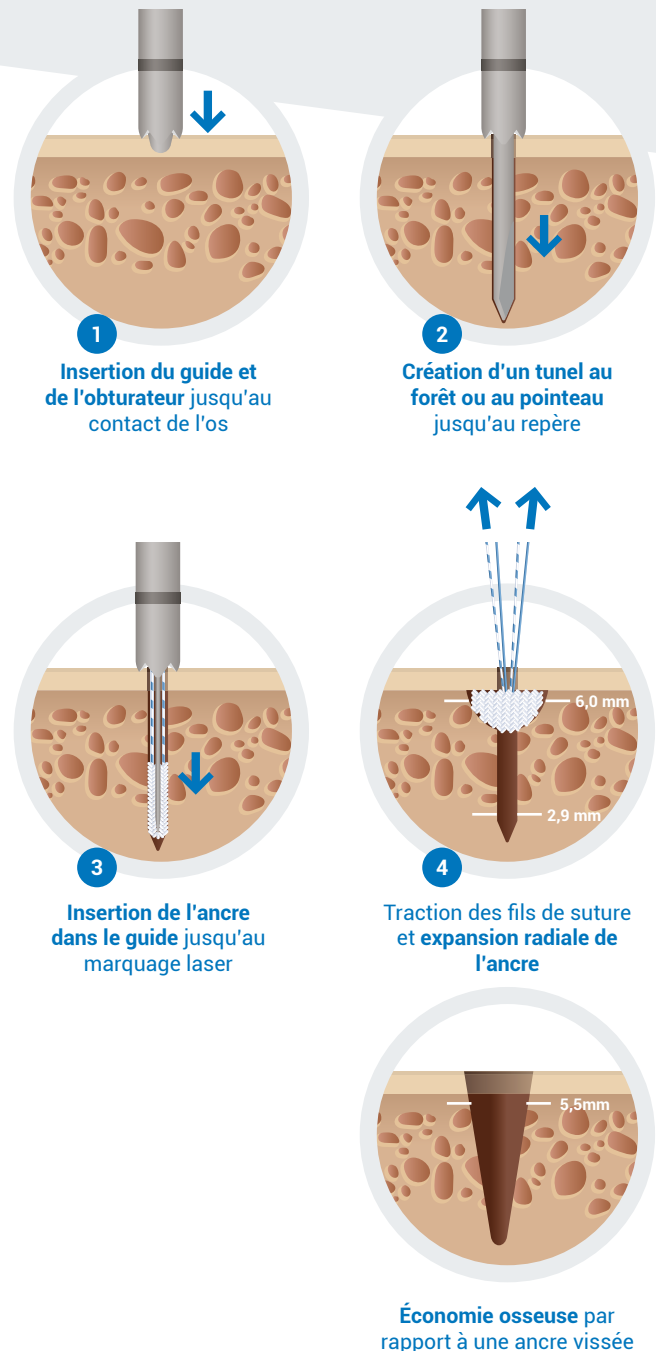

AVANTAGES

- Economie osseuse
- Simplicité d'utilisation
- Pas de matériau rigide en cas de révision ou dans l'articulation en cas d'arrachement
- Radio transparent
- Utilisable sous arthroscopie ou en mini-open (aiguillées)
- Biocompatible
- Résistance à l'arrachement élevée
- Non résorbable

Extrémité biseautée
pour une meilleure impaction
dans le tissu osseux

Marquage laser
repérage d'insertion





ÉPAULE

COIFFE DES ROTATEURS,
TÉNOËSE ET RÉINSERTION
DU BICEPS

Ø2,9
mm



ÉPAULE

SLAP, BANKART
INSTABILITÉ



CHEVILLE

RÉINSERTION TENDINEUSE
ET LIGAMENTAIRE

Ø1,8
mm



CHEVILLE

RÉINSERTION TENDINEUSE
ET LIGAMENTAIRE



ÉPAULE

SLAP, BANKART
INSTABILITÉ

Ø1,5
mm



MAIN

RÉINSERTION TENDINEUSE
ET LIGAMENTAIRE

Ø1,2
mm



AVANTAGES DES SUTURES

Les ancrés ARTHROVIMS® SOFT ANCHOR sont associées à 2 ou 3 fils de suture USP2 (en polyéthylène de très haut poids moléculaire UHMWPE).



HAUTE RÉSISTANCE À LA TRACTION
RÉALISATION AISÉE DE NOEUDS
SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ DES SUTURES

STOCKAGE

Les ancrs **ARTHROVIMS® SOFT ANCHOR** doivent être stockées dans leur emballage d'origine intact, dans un environnement propre et sec, à température ambiante.

PRODUITS & INSTRUMENTATION

Les ancrs **ARTHROVIMS® SOFT ANCHOR** sont conditionnées sous double sachet, et stérilisées à l'oxyde d'éthylène. L'instrumentation pour la chirurgie sous arthroscopie **est disponible**.

Usage unique. Ne pas restériliser.

Pour toute information complémentaire, merci de lire la notice d'utilisation.

DÉSIGNATION	TAILLE	RÉFÉRENCE
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR	2,9	VIMS-029
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR with needles	2,9 aiguillée	VIMS-029N
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR	1,8	VIMS-018
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR with needles	1,8 aiguillée	VIMS-018N
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR with needles	1,5 aiguillée	VIMS-015N
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR with needles	1,2 aiguillée	VIMS-012N
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR (1 suture + 1 tape blue)	2,9	VIMS-29FTB
ARTHROVIMS SOFT ANCHOR (1 suture + 1 tape white/blue)	2,9	VIMS-029FTWB

INSTRUMENTATION

Les ancrs **ARTHROVIMS® SOFT ANCHOR** doivent être utilisées avec l'instrumentation spécifique fournie par Vims.



CE 1984
CLASSE IIb / ANCRE

CE
CLASSE I / INSTRUMENTATION